



Mobilità Mobility

Serie **LG 2004 S**


(Codice I.S.O. 18.30.12.003)



Antano Group s.r.l, da sempre attenta alle necessità di chi usufruisce direttamente (disabile) o indirettamente (accompagnatore) dei suoi prodotti, ha ritenuto indispensabile fare un ulteriore passo avanti nella progettazione. In quest'ottica nasce il montascale **LG 2004/S (special) 360°**, dotato di 4 ruote (2 anteriori e 2 posteriori) che permettono all'accompagnatore di ruotare il mezzo in totale agilità e senza il minimo sforzo su pianerottoli e superfici piane, senza dover far forza sul timone per effettuare la manovra

*Antano Group S.r.l. is always very careful meeting both the needs of the direct user (disable person) and the indirect user (care attendant) of its products, so the engineering team has planned a further step which has led the company to the manufacturing of the stairway climber **LG 2004/S (special)360°***

It is characterized by 2 front and 2 rear wheels which allow the care attendant to handle and turning effortlessly the device on landings as well on level ground.

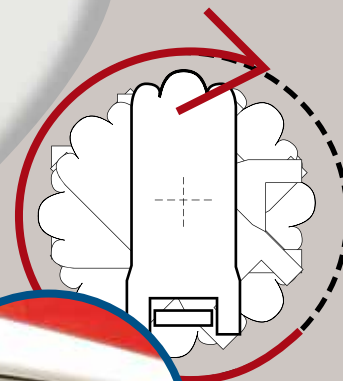

360°

Ruota 360° su se stesso senza sforzo



Affidabile Reliable

LG2004S è realizzato in acciaio e materiali testati di prima qualità per resistere a lungo.

LG2004S is carried out with iron and high quality materials, for a better long standing.

Sicuro Safe

Le cinture di sicurezza regolabili ed il dispositivo di blocco motore garantiscono la stabilità e la sicurezza del passeggero

The adjustable life-belts and jamming device guarantee the passengers safety and stability.



Trasportabile Transportable

Le dimensioni contenute e le parti smontabili permettono un facile trasporto.

Its small dimensions and the dismantlable parts allow an easy transport.



Agile Nimble

Il sistema di sollevamento delle ruote di manovra a comando elettrico permette di girare agevolmente su se stesso

The electrical wheels lifting system allows to move easily on itself

Dati Tecnici - Technical details

Massa complessiva:

Total weight:

Kg. 45,62**Massa del timone:**

Weight of the handle bar with controls:

Kg. 8,92**Massa del caricabatteria:**

Weight of the battery charger:

Kg. 0,700**Alimentazione del carica batteria:**

Battery charger power supply:

220 V**Potenza del motore**

Motor power

300 W**Potenza assorbita caricabatteria:**

Battery charger power absorbed:

80 W**Massimo peso trasportabile:**

Maximum trasportable weight

Kg. 130**Percorrenza in autonomia:**

Operating range:

23 floors/piani**Autonomia con indicatore di batteria in riserva:**

operating range with reserve battery indicator on:

2 floors/piani**Misura minima di larghezza scala:**

Minimum stairs dimension:

cm 100**Massima altezza scala**

Maximum stair heigth

cm 22**Spazio minimo di manovra su pianerottolo a "L":**

Minimum dimension of "L" shaped landing:

cm 100x100**Spazio minimo di manovra su pianerottolo a "U":**

Minimum dimensions of "U" shaped landing:

cm 100x200**Inclinazione massima**

Maximum angle

70% = 35°**Temp. di uso e stoccaggio:**

Storage and use temperature:

-10°C+50°C**Velocità massima:**

Maximum speed:

15 steps/min