



#### Dati Tecnici / Technical specifications

Peso / Weight	senza ruote 75.4 kg without wheels 75.4 kg con ruote 76 kg with wheels 76 kg
Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient)	135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) paziente + materasso + accessori / Maximum workload (safe workload) patient + mattress + accessories	170 kg
Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P / Max overall dimensions (including folded crank) L x D	senza ruote 900 x 2095 x 955 mm without wheels 900 x 2095 x 955 mm con ruote 900 x 2095 mm with wheels 900 x 2095 mm
Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the wire bed frame from the ground H (min/max)	senza ruote 400 / 800 mm without wheels 400 / 800 mm con ruote 390 / 790 mm with wheels 390 / 790 mm
Altezza pediera/testiera / Footboard/headboard height	565 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions L x D	895 x 1990 mm
Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single sections of the wire bed frame	735-283-385-385 mm
Inclinazione sezione mobile testa (max) (°) / Head mobile section inclination (max) (°)	0° - 60°
Inclinazione sezione mobile gambe (max) (°) / Leg mobile section inclination (max) (°)	0° - 34°
Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot section height (max)	220 mm
Dimensioni dell'imballo del piano rete / Dimensions of the wire bed frame packaging	950 x 2125 x 210 mm
Dimensioni dell'imballo della base / Dimensions of the base packaging	940 x 1740 x 380 mm
Peso totale con imballo del piano rete / Total weight with wire bed frame packaging	44 kg
Peso totale con imballo della base / Total weight with base packaging	senza ruote 42.4 kg without wheels 42.4 kg con ruote 43 kg with wheels 43 kg
Peso del materasso (max) / Weight of mattress (max)	20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max)	15 kg

## EUCLIDE 4S AVO

Il Letto a 3 snodi 4 sezioni è predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione testa gambe e piedi regolabile a mezzo sistema a vite con manopola ergonomica salvaspazio. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate e pannello in polipropilene. Movimentazione ad altezza variabile da un minimo di 400 mm ad un massimo di 800 mm a mezzo spintore oleodinamico a pedale. Il dispositivo medico si compone di un piano rete regolabile in altezza, di una base di supporto su cui è installato il sistema oleodinamico per la regolazione dell'altezza, di pediera e testiera e di un sistema di movimentazione manuale delle sezioni mobili


The 3-joint, 4-section bed is set-up for patient lifting pole and IV stand. The head, leg and feet section is adjustable with a screw system with space saving ergonomic knob. Bed with coated steel tubular frame (polar white) ø40x20x1.5 mm with rectangular cross-section reinforced with crossbar. Electro-welded mesh structure. Coated weight-bearing backrest and polypropylene panel. Variable height movement from a minimum of 400 mm to a maximum of 800 mm by a pedal-operated hydraulic pusher. This medical device is composed of a height-adjustable wire bed frame, a supporting base with a hydraulic system installed for height adjustment, with footboard and headboard and manual movement system for the mobile sections

## EUCLIDE 4S AVO 01

Versione con ruote / Version with wheels



■ Ruota frenante e direzionale / Braking and directional wheel

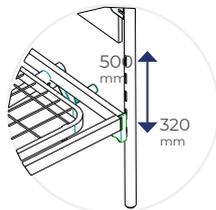

■ Regolazione altezza del piano rete / Wire bed frame height adjustment