





# LG 2004 BASIC

## Montascale a cingoli

La gamma dei montascale a cingoli ha anche la versione BASIC che pur non avendo la rotazione a 360° riesce comunque a girare senza sforzi sul pianerottolo grazie ai ruotini ausiliari posizionati nella parte posteriore. L'azienda è riuscita quindi con le sue tecniche innovative a raggiungere il risultato abbattendo i costi.

## Stairlift with tracks

The range of stairway climbers with tracks also has a BASIC version that does not offer 360° rotation, it still turns effortlessly on landings thanks to additional small rear wheels. The company has therefore succeeded in achieving the result with its innovative techniques and containing costs.

## LG 2004 BASIC



### **Nuova versione base - New base version**

LG 2004 Basic mantiene gli elevati standard di sicurezza del montascale a cingoli LG 2004, senza l'ausilio della rotazione di 360°.

Il timone non ha le estremità pieghevoli /

LG 2004 Basic maintains the high safety standards of LG 2004 stairway climbers with tracks, without the aid of 360° rotation.

The drawbar does not have folding ends






- Led per punto di equilibrio / LED for balance point



- Ruotini ausiliari / Additional wheels

Posizionati sulla parte posteriore, facilitano lo spostamento sul pianerottolo / Positioned at the back, they make manoeuvres on landings easier

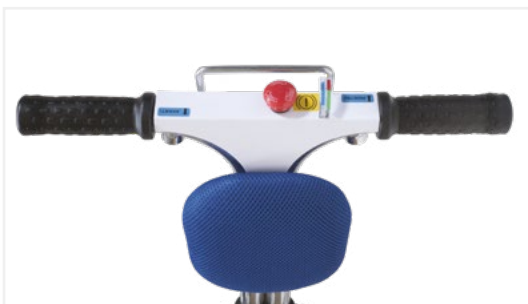

- Protezione pulsante di sicurezza / Safety button protection

Protezione metallica per evitare pressioni involontarie del pulsante blocco di emergenza / Metal protection to avoid accidentally pressing the emergency lock button

### SERIE LG 2004 Basic - Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso complessivo - Overall weight:	Kg 44
Peso corpo macchina - Base equipment weight	Kg 35
Peso del timone - Drawbar weight	Kg 9
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions	150x64x92 Cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	100-240 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight	Kg 130
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up	540 gradini (con passeggero di 85 Kg) 540 steps (with 85 Kg passenger)
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	80 gradini / steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	77 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	98x98 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing	90x170 Cm
Inclinazione massima - Maximum inclination	70% - 35°
Temperatura di uso - Operating temperature	0°C / 40°C
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)	-10° ÷ 50°
Velocità massima - Maximum speed	15 Gradini per minuto 15 steps per minute
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x70x43 cm